


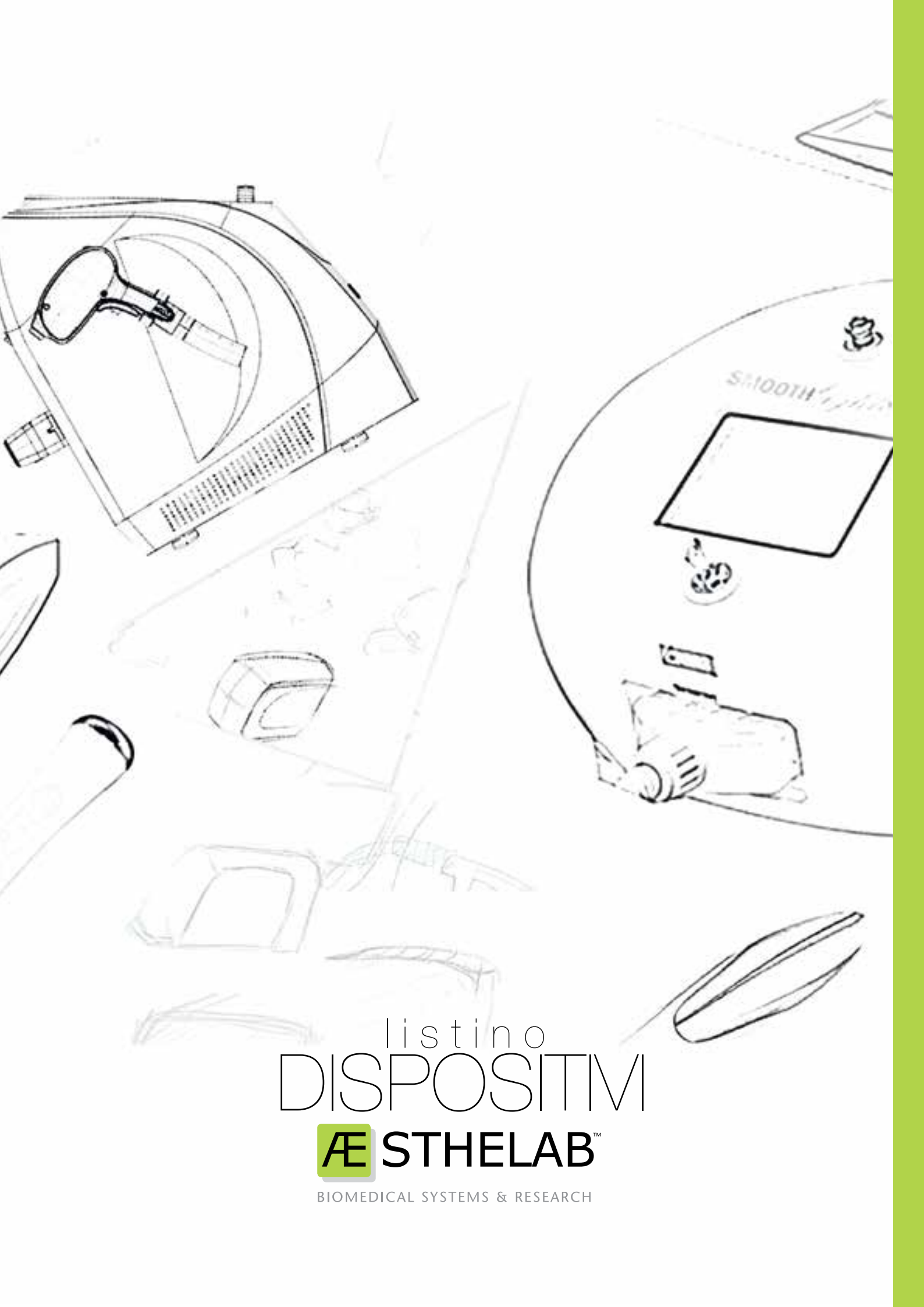

listino
DISPOSITIVI

ÆSTHELAB™

BIOMEDICAL SYSTEMS & RESEARCH

Paura degli aghi? ***Prova **Acthyderm!*****



ACTH^YDERM



Anti-aging | Viso | Corpo | Cellulite | Smagliature

ÆSTHELAB™
BIOMEDICAL SYSTEMS & RESEARCH
www.aesthelab.com

ACTHYDERM



CELLULITE - ADIPOSITÀ LOCALIZZATA ANTIAGING - TONIFICAZIONE - SMAGLIATURE

Acthyderm è il primo dispositivo realizzato in Europa ad utilizzare l'elettroporazione della pelle per la veicolazione transdermica di farmaci e cosmetici. Tale metodica è stata denominata Mesoporazione ed è una tecnica non-invasiva che prevede l'introduzione di un principio attivo, senza l'utilizzo di aghi, nel derma in corrispondenza della zona affetta dalla patologia.

La tecnica consiste nell'introdurre nei tessuti, in modo selettivo e profondo, sostanze medicamentose idrosolubili, ancor meglio se ionizzabili, tramite delle specifiche sonde che ne consentono la penetrazione e l'assorbimento, per elettroporazione del tessuto, a livelli profondi e in quantità finora impensabili con le metodiche tradizionali.



PIASTRA CONDUTTIVA



MESOFILL ROLL-ON



ACCESSORI



STYLO

Software MESOX 1.0



VISAGE



BODY



MESOX



TRICOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

TIPOLOGIA: MESOPORAZIONE E ELETTROPORAZIONE

CLASSE: I BF

ALIMENTAZIONE: 220V / 50Hz

PROGRAMMI: 14 PROGRAMMI SPECIALISTICI PER VISO, CORPO, CAPELLI

SOFTWARE: RELEASE MESOX 1.0

ASSORBIMENTO: 25W

CERTIFICAZIONI: CE - FDA - KFDA - PCT

Risultati immediatamente visibili e scientificamente provati. Senza aghi, senza bisturi e senza dolore. Migliaia di donne lo hanno già scelto in tutto il mondo.

L'efficienza di Acthyderm è stata provata da prestigiosi Enti di ricerca internazionali e laboratori indipendenti.

Il ridotto impatto sistemico e l'assenza di effetti collaterali, rendono la Mesoporazione particolarmente consigliata in medicina estetica, in medicina sportiva nel trattamento delle patologie articolari e tendinee, e di uso praticamente illimitato per le affezioni localizzate. Acthyderm consente una terapia transcutanea semplice, rapida ed efficace e risultati sorprendenti senza chirurgia, senza iniezioni e senza effetti collaterali. La scelta di un metodo di veicolazione non invasivo aumenta notevolmente la compliance del paziente che non deve sopportare né il trauma psicologico delle iniezioni né i pomfi che per qualche giorno risultano visibili sul volto e sul corpo dopo le microiniezioni.



ACTHYDERM TOUCH

la bellezza
viene da dentro
**non essere
superficiale**



DALLA COMPROVATA EFFICACIA DEL MESOFILLING

ACTHYDERM Touch

ANTI-AGING Trattamenti Viso

Dalla comprovata efficacia del Mesofilling nasce finalmente il trattamento domiciliare, Acthyderm Touch. Pratico ed ergonomico contrasta la comparsa degli inestetismi cutanei causati dall'invecchiamento:

- RUGHE D'ESPRESSIONE
- LINEE SOTTILI
- BORSE
- OCCHIAIE
- MACCHIE E DISCROMIE
- RILASSAMENTO CUTANEO

Acthyderm Touch può essere utilizzato dove vuoi. Le sue dimensioni contenute, l'assenza di interruttori, il design ergonomico rendono possibile l'applicazione in qualsiasi momento della giornata. La biostimolazione generata dal campo energetico coinvolge piacevolmente i sensi regalando un momento di relax, benessere e... bellezza!

COME AGISCE ACTHYDERM TOUCH

Acthyderm-Touch è una vera ginnastica facciale. Crea al contatto con la pelle un campo energetico in grado di "accelerare e spingere" i principi attivi dei sieri cosmetici Mesofill attraverso la cute per farli penetrare più in profondità.



1. Stimola e migliora il microcircolo superficiale
2. "Risveglia" le cellule, in particolare i fibroblasti, che producono nuovo collagene ed elastina
3. Aumenta l'efficacia delle formulazioni cosmetiche favorendo il loro assorbimento

- A. Dona un colorito più luminoso e uniforme
B. Al tatto una pelle più elastica e compatta
C. Trattamento specifico in base all'inestetismo da trattare



Prodotti Associabili



BOTOFILL

Ideale per il trattamento di rughe d'espressione.



EXAGE

Leviga il viso e riempie dall'interno il solco delle rughe.



EYELIS

Ideale per trattare gli inestetismi della zona periorbitale.



SKINPERFECT

E' perfetto per il trattamento di pelli impure a tendenza acneica.



LUMINANCE

Ideale per il trattamento di macchie melaniche.

Lipobeam

L'ALTERNATIVA NATURALE ALLA LIPOSUZIONE

PROVA COSTUME?
NIENTE PAURA...TI REGALIAMO LA FORMA PERFETTA

Efficacia scientificamente testata:
per ogni sessione circa 500Kcal
ovvero 0,4/0,5 centimetri
di circonferenza addominale.





SPECIFICHE TECNICHE

TECNOLOGIA: LASER A SEMICONDUOTTORE

LUNGHEZZA D'ONDA: 760NM

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: CONTINUA E PULSATA

APPLICATORE LASER: GRANDE X 8PCS -
PICCOLO X 2PCS

CLASSIFICAZIONE: CLASSE IIIB

SISTEMA DI CONTROLLO: 8" TFT TOUCH SCREEN

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO: AD ARIA

ALIMENTAZIONE: AC230V $\pm$ 10%, 50Hz $\pm$ 1Hz
AC110V $\pm$ 10%, 60Hz $\pm$ 1Hz

DIMENSIONI: (40x34x43) CM

PESO: 10 KG

L'energia del Laser accelera localmente il tuo metabolismo. Come un massaggio e in totale relax perdi centimetri al giro vita, nei fianchi e sulle cosce. Zero Dolore, Zero Stress, Zero tempi di recupero. Lipobeam è il trattamento di body-contouring che avviene in sedute non invasive della durata di 40/60 min., durante la quale il cliente è immerso in una dimensione di piacevole rilassamento. Lipobeam è una metodica ingegnerizzata per sedute di auto trattamento per contrastare naturalmente gli inestetismi della cellulite e le adiposità localizzate. La metodica non richiede l'assistenza dell'operatore, un'anamnesi accurata ed una diagnosi mirata sono infatti sufficienti per impostare e personalizzare i parametri di trattamento e garantire la massima efficacia e sicurezza della terapia. Lipobeam è totalmente indolore e non richiede assistenza di personale durante il trattamento, né tempi di recupero. Il cliente potrà immediatamente ritornare alle sue attività quotidiane.



DISPLAY



EMETTITORI



EMETTITORI

SISTEMA BIA DI MYCUBE

MYCUBE è in grado di effettuare in pochi secondi un'analisi bioimpedenziometrica, precisa, sicura e non invasiva con rilevazione di Resistenza, Reattanza e Angolo di Fase. Il sofisticato software MyCubetest calcola i valori fisiologici di interesse restituendoli in forma VETTORIALE, GRAFICA e NUMERICA. Il report di stampa è dettagliato, completo e di immediata interpretazione.

PARAMETRI ANALIZZATI:

BMR * Basal Metabolic Rate | TBW * Total Body Water
ICW * Intra Cellular Water | ECW * Extra Cellular Water
BCM * Body Cellular Mass | FM * Fat Mass
Fabbisogno Proteico Giornaliero | FFM * Fat Free Mass
Na/K * Scambio Sodio Potassio | BMI * Body Mass Index



CAMPI DI APPLICAZIONE

MyCube nasce da approfondite ricerche nel campo della Bioimpedenziometria e rappresenta un nuovo e rivoluzionario approccio alla nutrizione e al benessere. Le cause di piccoli e grandi disturbi della salute, infatti, sono riconducibili nel 75% dei casi ad una cattiva alimentazione. MyCube rileva alcuni parametri elettrici del nostro organismo ottenendo una valutazione qualitativa e quantitativa precisa, dettagliata e completa della composizione corporea del soggetto, aiutando il professionista nella redazione del quadro anamnestico del paziente. Questo è il motivo per cui, MYCUBE trova applicazione in:

- MEDICINA GENERALE
- NUTRIZIONE
- CENTRI DI DIMAGRIMENTO
- HEALTH & FITNESS
- MEDICINA ESTETICA
- FARMACIA





INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCIENTIFICAMENTE PROVATO MONITORAGGIO A DISTANZA

VALORIZZA IL TUO TEMPO

Mycube è un sistema avanzato per l'analisi della composizione corporea. E' l'unico sistema di bia tri-compartimentale, telemetrico, bidirezionale e istantaneo.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Metodica brevettata

MyCube ha le dimensioni di una PENDRIVE e si collega alla porta di un qualsiasi notebook, configurandosi immediatamente per un semplice ed immediato utilizzo. Il software MyCubeTest utilizza una piattaforma internet multi service che arricchisce la funzionalità di base del dispositivo con molteplici applicazioni utili al professionista per gestire e monitorare il paziente.

1-TREND REPORT: grafico delle variazioni nel tempo dei singoli parametri

2-AGENDA: gestione automatizzata degli appuntamenti via sms/e-mail

3-WMS: Warehouse Management System. Questa funzione favorisce la vendita e la fornitura di integratori alimentari a magazzino.



SCIENTIFICAMENTE PROVATO

Università e laboratori di ricerca indipendenti hanno confermato la validità del Dispositivo. "siamo soddisfatti dello strumento CUBE sia per la semplicità d'uso che per la chiarezza dei risultati sviluppati e presentati sul grafico del referto dell'esame bioimpedenziometrico.

Pertanto continueremo ad utilizzarlo per aumentare il campione di soggetti esaminati e ad osservare i risultati nel tempo"

23 febbraio, 2011 - Ambulatorio di Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale - Dipartimento di Scienze Mediche Preventive- Università di Napoli, Federico II

MONITORAGGIO A DISTANZA

Università e laboratori di ricerca indipendenti hanno confermato la validità del Dispositivo. "siamo soddisfatti dello strumento CUBE sia per la semplicità d'uso che per la chiarezza dei risultati sviluppati e presentati sul grafico del referto dell'esame bioimpedenziometrico.

Pertanto continueremo ad utilizzarlo per aumentare il campione di soggetti esaminati e ad osservare i risultati nel tempo"

23 febbraio, 2011

Ambulatorio di Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale - Dipartimento di Scienze Mediche Preventive- Università di Napoli, Federico II



ACTHY•RF50S

La Radiofrequenza
rimette in moto i fibroblasti,
stimolandoli alla produzione
di collagene ed elastina

RUGHE E LINEE SOTTILI
ANTI-AGING
BRACCIA
ADDOME
SMAGLIATURE
GLUTEI
COSCE
TONIFICAZIONE



ACTHY•RF50S



L'apparecchiatura ACTHY RF50S eroga corrente ad alta frequenza (Radiofrequenza) che incontrando resistenza nei tessuti, induce un innalzamento della temperatura nel derma e nell'ipoderma fino a 3/5cm di profondità. Quest'innalzamento indotto e localizzato della temperatura è chiamato Diatermia. La diatermia risolve il danno biologico di forme di patologia cronica caratterizzate da degenerazione e fibrosi. Il tessuto cicatriziale fibroso viene rivascolarizzato attraverso l'aumento della temperatura interna fino a 41 °C. con il ripristino del metabolismo corretto tramite correnti di spostamento che producono tre tipo di effetti: biochimico, termico e meccanico. L'effetto Diatermico è usato per drenare, incrementare le funzioni cellulari, aumentare il flusso nel microcircolo ed indurre una reazione di contrazione nei fibroblasti, con conseguente denaturazione e nuova produzione di collagene.

SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA: $\leq 50W$

FREQUENZA: 1MHz

NUMERO APPLICATORI: 3

DIAMETRO MANIPOLI MONOPOLARE: 7 CM

DIAMETRO MANIPOLO BIPOLARE: 3 CM

PESO LORDO: 16 KG

SPECIFICHE ELETTRICHE: 110/230V, 50/60Hz

SCHERMO LCD: 8" TOUCH SCREEN

Ideale per il trattamento di:

- Lifting viso, collo e décolleté
- Pelli atone e lassità cutanee
- Drenaggio
- Smagliature
- Adipe in eccesso
- Panniculopatie edemato fibro sclerotiche (PEFS I II III)



MANIPOLI CORPO



MANIPOLO VISO



VISTA LATERALE



DISPLAY

METTI IN MOSTRA

ACTHY • RF100

IL TUO LATO MIGLIORE.

Le fibre di collagene ed elastina sono componenti di sostegno fondamentali per la tua pelle. Alimentazione poco corretta, predisposizione genetica, e il processo di invecchiamento danneggiano queste strutture di sostegno cutaneo. La **radiofrequenza** "rimette in moto" i fibroblasti, stimolandoli alla produzione di collagene ed elastina. Il risultato è una pelle più tonica ed elastica.



RUGHE E LINEE SOTTILI

ANTI-AGING

BRACCIA

ADDOME

SMAGLIATURE

GLUTEI

COSCE

TONIFICAZIONE

ACTHY • RF100



LIFTING VISO, COLLO E DECOLLETÈ SMAGLIATURE E LASSITÀ CUTANEA

L'apparecchiatura ACTHY RF100 eroga corrente ad alta frequenza (Radiofrequenza) che incontrando resistenza nei tessuti, induce un innalzamento della temperatura nel derma e nell'ipoderma fino a 3/5cm di profondità. Quest'innalzamento indotto e localizzato della temperatura è chiamato Diatermia.

La diatermia risolve il danno biologico di forme di patologia cronica caratterizzate da degenerazione e fibrosi. Il tessuto cicatriziale fibroso viene rivascolarizzato attraverso l'aumento della temperatura interna fino a 41 °C. con il ripristino del metabolismo corretto tramite correnti di spostamento che producono tre tipi di effetti: biochimico, termico e meccanico.

Nella Medicina Estetica l'effetto Diatermico è usato per drenare, incrementare le funzioni cellulari, aumentare il flusso nel microcircolo ed indurre una reazione di contrazione nei fibroblasti, con conseguente denaturazione e nuova produzione di collagene.

SPECIFICHE TECNICHE

CERTIFICAZIONE: SGS 0120

CLASSE: CLASS 1, TIPO BF

ALIMENTAZIONE: 110/220V, 50/60Hz

CONTROL MONITOR: 320×240 BLACKLIGHT
MONOGRAPHIC LCD

FREQUENZA RF: 470Hz +-10%

POTENZA MAX: 25W - 50W +-10% MANUALE
O AUTOSET

CONTROLLO INTENSITÀ: 1 - 100% (STEP 1%)

TIMER: 1-30MIN (STEP 1MIN.)

PRESET TEMPERATURA: 37°C -
47°C (0,5°C STEP)

Ideale per il trattamento di:

- Lifting viso, collo e décolleté
- Pelli atone e lassità cutanee
- Drenaggio
- Smagliature
- Adipe in eccesso
- Panniculopatie edemato fibro sclerotiche (PEFS I II III)



MANIPOLO BIPOLARE



PIASTRA E MANIPOLO
CONDUTTIVO



APPLICATORI
CAPACITIVI



DISPLAY/SOFTWARE

LVT 250

RADIOFREQUENZA

LIFTING VISO, COLLO
E DECOLLETTÈ, SMAGLIATURE
Adipe in eccesso, Terapia del dolore

ECCO LA SOLUZIONE



LVT 250

RADIOFREQUENZA



L'apparecchiatura LVT 250 eroga corrente ad alta frequenza (Radiofrequenza) che incontrando resistenza nei tessuti, induce un innalzamento della temperatura nel derma e nell'ipoderma fino a 3/5cm di profondità.

Quest'innalzamento indotto e localizzato della temperatura è chiamato Diatermia.

La diatermia risolve il danno biologico di forme di patologia cronica caratterizzate da degenerazione e fibrosi. Il tessuto cicatriziale fibroso viene rivascolarizzato attraverso l'aumento della temperatura interna fino a 41 °C. con il ripristino del metabolismo corretto tramite correnti di spostamento che producono tre tipo di effetti: biochimico, termico e meccanico. Nella Fisioterapia, quando la Radiofrequenza viene applicata ad un trigger point, la resistenza dello stesso convertirà la corrente in energia termica riducendo il dolore, incrementando la circolazione sanguigna verso il target, facilitando il drenaggio e dando inizio ad un rapido assorbimento dell'infiammazione.

SPECIFICHE TECNICHE

CERTIFICAZIONE: SGS 0120

CLASSE: CLASS 1, TIPO BF

ALIMENTAZIONE: 110/220V, 50/60Hz

CONTROL MONITOR: 320×240 BLACKLIGHT MONOGRAPHIC LCD

FREQUENZA RF: 470Hz +-10%

POTENZA MAX: 100W - 250w +-10%
MANUALE O AUTOSSET

CONTROLLO INTENSITÀ: 1 - 100% (STEP 1%)

TIMER: 1-30MIN (STEP 1MIN.)

PRESET TEMPERATURA: 37°C - 47°C (0,5°C STEP)



ELETTRODI NEGATIVI



BIO THERMAL STONE



MANIPOLO BIPOLARE



MANIPOLI CAPACITIVI



PULSAR


L'AMICO DELLA PELLE

Il mondo dell'epilazione
è stato rivoluzionato
da PULSAR

Tecnologia a luce pulsata
studiata per lavorare in tutte le zone
in modo confortevole e sicuro
durante e dopo il trattamento



MAGISTRA ANTIAGING
MEDICAL ACADEMY

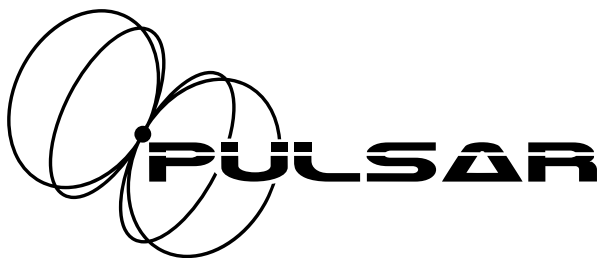

PULSAR è una tecnologia di nuovissima generazione, si distingue per un sofisticato sistema di raffreddamento cutaneo che consente di operare con uno standard di sicurezza molto elevato. Il dispositivo è generatore di impulsi luminosi con uno spettro di emissione variabile da 620 a 1100nm ed una densità di energia massima di 26J/cm². L'apparato è per uso estetico, ed è conforme al Regolamento relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. L'uso è riservato a operatori estetici professionali, adeguatamente istruiti sulle modalità di impiego dell'apparecchio e sulle precauzioni per la sicurezza da adottare.

SPECIFICHE TECNICHE

LUNGHEZZA D'ONDA: 640/1100 NM

SPOT SIZE: 15*50MM

ENERGIA: 10-18 J/CM²

DURATA IMPULSO: 2-20 MS

SEQUENZA IMPULSO: 1-15 IMPULSI

TEMPO DI RITARDO: 2-50 MS

DISPLAY OPERATIVO: 8.4" TFT TRUE COLOR LCD SCREEN

MANIPOLO: MANIPOLO CON FILTRO VELOCEMENTE INTERCAMBIABILE

DISPLAY OPERATIVO: 8.4" TFT TRUE COLOR LCD SCREEN

IPL DRIVE POWER: 1200 W

LAMPADA: 80.000 - 100.000 SHOTS

PESO: 21 KG

La fotoepilazione è un moderno metodo di depilazione che sfrutta il principio fisico della fototermolisi selettiva per contrastare la ricrescita dei peli superflui. Nel caso della fotoepilazione questa selettività è sfruttata per surriscaldare i peli lasciando inalterata la cute circostante. L'obiettivo della fotoepilazione non è quello di bruciare i peli, bensì di utilizzarli per veicolare il calore alla matrice posta alla base del follicolo pilifero. Tipicamente sono richieste 8-10 sedute intervallate a distanza di circa un mese l'una dall'altra. Quanto maggiore è il contrasto tra la pelle chiara e i peli scuri, tanto maggiore sarà l'efficacia della fotoepilazione.



FRONT PANEL



DESIGN INNOVATIVO



MANIPOLO



Ottimi risultati su tutti i fototipi (I - VI)

SMOOTH *Light* 808

EFFICIENTE RAPIDO INDOLORE

EPILAZIONE LASER

STOP AI PELI SUPERFLUI!

EFFICACE SU OGNI FOTOTIPO

SMOOTH *Light* 808



L' 808KM è il più moderno laser della gamma SMOOTHLIGHT utilizzabile in estetica per trattamenti di fotoepilazione. Con una potenza di ben 600W e una lunghezza d'onda di 808nm, l'energia emessa dal laser è in grado di attraversare la cute ed essere assorbita dai pigmenti dei peli all'interno dei bulbi piliferi. Di conseguenza si determina un aumento della temperatura e distruzione definitiva delle cellule germinative del bulbo stesso.

Il tutto avviene senza ledere i tessuti circostanti, ottenendo quindi l'effetto di una depilazione permanente tramite il principio della fototermolisi selettiva. SmoothLight 808KM può trattare efficacemente ogni pelo pigmentato ed è adatto ad essere utilizzato in tutte le zone del corpo e su tutti i tipi di pelle compresi i fototipi più scuri.

SPECIFICHE TECNICHE

TIPO DI LASER: LASER DIODO - λ :808NM

POTENZA: 600W

DENSITÀ DI ENERGIA: 2-40J/CM²

DIMENSIONE SPOT: 10MMx18MM

LARGHEZZA D'IMPULSO: 5-300MS

FREQUENZA: 1-15Hz

ASSORBIMENTO: 1500W

RAFFREDDAMENTO: CHILL TIP SAPPHIRE
TECHNOLOGY E RICIRCOLO D'ACQUA



EFFICACE RAPIDA INDOLORE
EPILAZIONE LASER
STOP AI PELI SUPERFLUI!

La Porta Blu
Centro Estetico

SMOOTH *Light* 808

STHELAB
MEDICAL SYSTEMS & RESEARCH

AMERICAN LASER
MEDICAL ACADEMY



MANIPOLO



ACCESSORI



DISPLAY



ATTACCO MANIPOLO



Breeze
2

il segreto della
tua bellezza è
nell'aria

**OSSIGENO
DERMO INFUSIONE**

è una metodica non invasiva.

L'aerografo diffonde sulla pelle un
"getto" d'ossigeno arricchito di sostanze
anti-aging utili a contrastare i possibili
danni dell'invecchiamento cutaneo.

I risultati sono visibili sin dal
primo trattamento.

Breeze₂



L'Ossigeno Dermoinfusione è una metodica non invasiva. L'aerografo diffonde sulla pelle un "getto" d'ossigeno arricchito di sostanze anti-aging utili a contrastare i possibili danni dell'invecchiamento cutaneo. I risultati sono visibili sin dal primo trattamento.

SPECIFICHE TECNICHE

MODALITÀ: CONTINUA, PULSATA, TEMPIFICATA

ACCESSORI A CORREDO:

SONDA DI MISURAZIONE IDRATAZIONE SKINTESTBIA

MANIPOLO NEBULIZZATORE AD AEROGRAFO

MANIPOLO INFUSIONE

ALIMENTAZIONE: 220V

POTENZA: 135 VA

PESO: 5KG

Ideale per il trattamento di:

- DISIDrataZIONE
- RUGHE E LINEE SOTTILI
- RUGHE D'ESPRESSIONE
- LASSITÀ CUTANEA
- PELLI IMPURE E ACNEICHE
- MACCHIE E DISCROMIE CUTANEE



AEROGRAFO



SKINTESTBIA




DIFFUSORE



even

È TEMPO DI MOSTRARE LE GAMBE

even è il laser vascolare sicuro ed
indolore per rimuovere i capillari

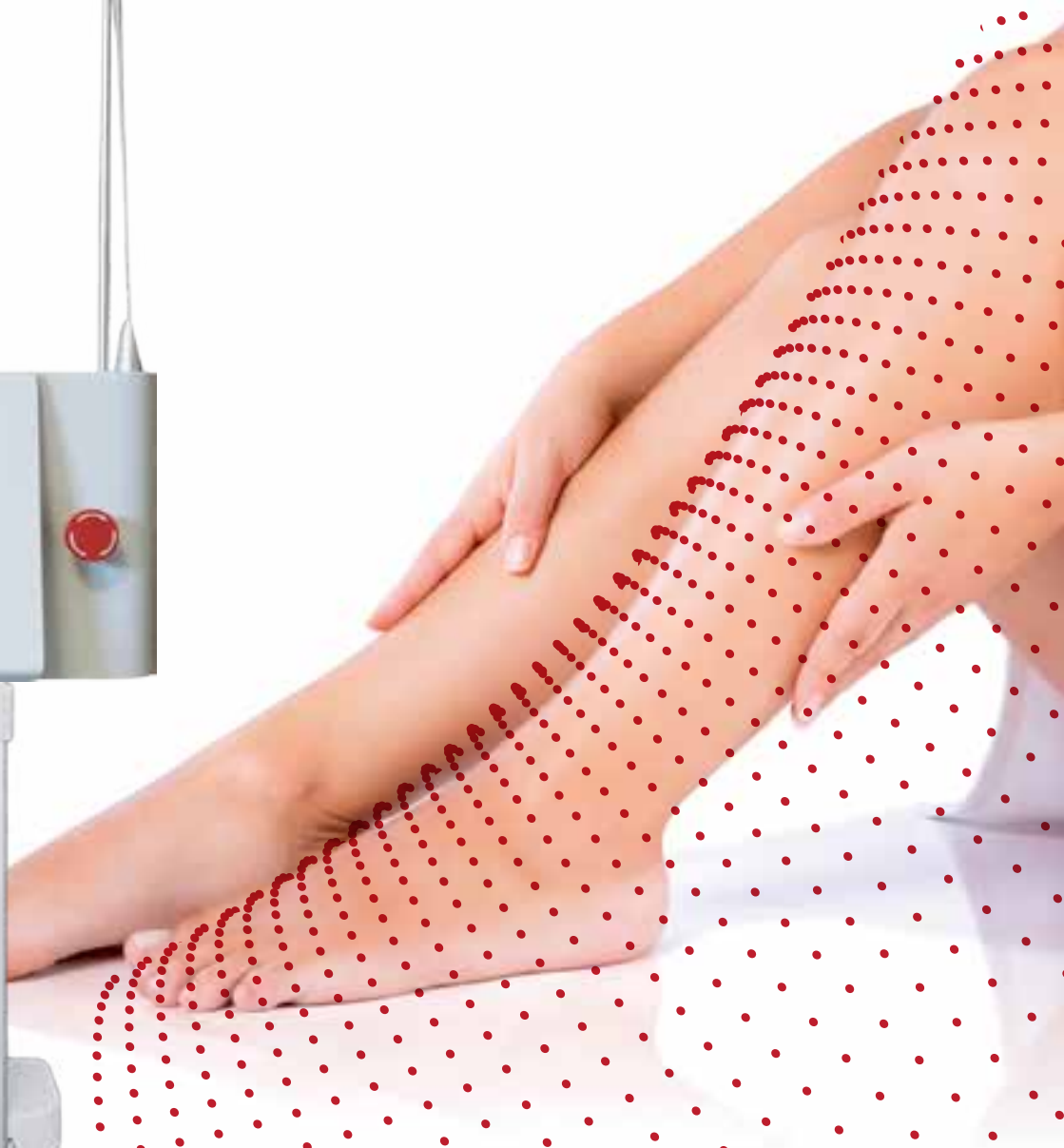

even



Even 135 è dotato di un generatore RF estremamente stabile prodotto in U.S. che consente una modalità di esercizio pulsata e continua. Il dispositivo emette un treno di impulsi ad alta frequenza di 13,5 MHz e concentra una elevata energia sulla punta del micro elettrodo.

Il calore prodotto coagula istantaneamente l'emoglobina presente nel tessuto interessato causando il collassamento delle pareti del vaso che saranno successivamente assorbiti dall'organismo. Il trattamento è ben tollerato e il tessuto circostante non è danneggiato dal calore, come avviene con il laser o la luce pulsata, perchè il micro elettrodo avendo un diametro di soli 0,01 mm consente di concentrare una elevata densità di energia termica unicamente sulla punta. Il dispositivo può essere efficacemente utilizzato per arricchire i protocolli antiaging con la rimozione di rimuovere macchie solari e senili.

SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA: 0-100% ADJUSTABLE $\pm 10\%$

FREQUENZA DI OUTPUT: 13.56MHz

FREQUENZA: 1000-2000Hz (STEP 100Hz)

TREATMENT TIP: 0.01mm

ALIMENTAZIONE: 220V/50Hz 110V/60Hz $\pm 10\%$

MODALITÀ: CONTINUA/IMPULSI

INSURANCE STANDARD: CONTINUA/IMPULSI

POTENZA INPUT: 50W

LUNGHEZZA MANIPOLO: 2M

SCHERMO LCD: 8" TOUCH SCREEN

PESO NETTO: 15 KG

PESO LORDO: 17 KG

DIMENSIONI: 34x34x40cm³



MANIPOLO



ANELLI DI REGOLAZIONE



VISTA LATERALE



AESTHELAB s.r.l.

Sede operativa: I traversa Pisciarelli, 1B
80078 – Pozzuoli NA

Sede legale: Via Manzoni, 257
80123 – Napoli

Tel: 081 762 15 83

info@aesthelab.com

WWW.AESTHELAB.COM